



cisneros
ELECTROMEDICINA

ULTRASONIDOS DE LIMPIEZA BUCAL

MINIPIEZÓN




- Limpiador de sarro por ultrasonido EMS (sistema piezoeléctrico). Ultrasonido de calidad superior con tecnología suiza.
- Medidas 15 x 14 x 7. Líder Mundial en odontología.
- Movimiento de la punta de 27000 a 32000 veces por segundo controladas por microprocesador.
- Muy fácil manejo.
- Mango de interior de titanio totalmente autoclavable.
- Incluye un equipo, una punta, una llave dinamométrica (siempre da la misma fuerza de apriete y evita golpes a la punta) un pedal, un mango esterilizable y una bomba de presión.




Punta A



Punta B

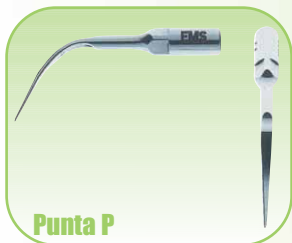

Punta P

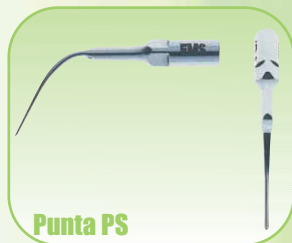

Punta PS

Puntas para la limpieza

- **Punta A** para una limpieza sin problemas. Siempre paralelo al diente –con un ángulo de 15°–. Usted elimina el sarro fácil y cuidadosamente.
- **Punta B** para eliminar el sarro fino en caras linguales.
- **Punta P** o también “Perio-Probe” le facilita a Usted el enjuague de bolsas subgingivales y arrebató el sarro subgingival.
- **Punta PS** o “Perio-Probe S”: EMS le entrega en mano, no sin orgullo, una peculiar, fina y mudeada punta. La más fina (70% más fina) y la más larga (40% más larga). La limpieza de la superficie radicular subgingival alcanzada, le parecerá más fácil que nunca.
PS le permite un profundo acceso, de hasta 10 mm en las bolsas periodontales.

PS igual irrigación. El líquido conducido uniformemente hasta la extremidad de la punta. Aún más: Gracias al alto efecto hidrodinámico la irrigación no sólo llega hasta la extremidad de la punta sino también profundamente en las bolsas ¡hasta el fondo de las bolsas!




cisneros
ELECTROMEDICINA

ULTRASONIDOS DE LIMPIEZA BUCAL

P5 BOOSTER
COCOON Y COCOON SPRAY


- Limpiador de sarro por ultrasonido SATELEC.
- Ultrasonido de calidad superior con medidas 15x14x7.
- Mango auto clavable.
- Un sólo mando de control de 4 sectores y 14 niveles de potencia de 0,5 % a 100%.
- Incluye un equipo, 3 puntas, un pedal, un mango esterilizable, una bomba de presión.

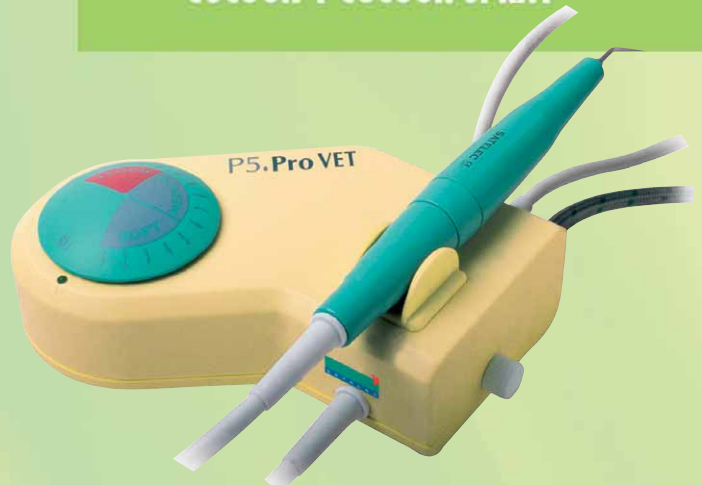

- Módulo piezoeléctrico Suprasson que permite asegurar la eliminación completa de los restos de sarro.
- Asegurar el raspado de las bolsas inferiores a 5 mm.
- Eliminar la placa bacteriana.
- Rapidez: la cavitación se alía a la eliminación mecánica de los depósitos.
- El módulo genera vibraciones lineales, de fácil control.
- Potencia: la frecuencia autoregulada de 27 a 32 Khz con una potencia muy superior a los instrumentos neumáticos.



- Enfriamiento por Spray para evitar la necrosis.
- Integra un micromotor 40.000 rpm.
- En el caso de Cocoon Spray integra micromotor con spray.
- Polioo.
- Se puede utilizar también en fresado, corte de dientes y en mini osteosíntesis.

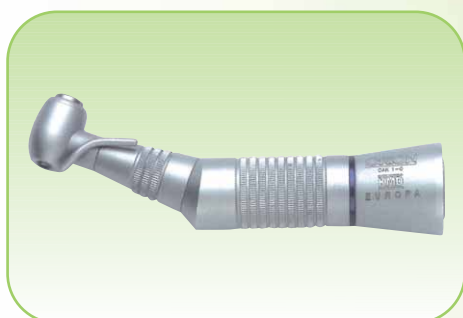

Contra - Ángulo



Cepillos de Nylon



Sitsalicine P. Roland